
 **WARNING:** Please mind potential fire risk and strictly follow the instruction manual for charging and storage. For disposal, please check your local authority's website for more information and dispose of the lithium-ion battery safely in accordance with the applicable legal requirements.

Smart VisualEar Pick

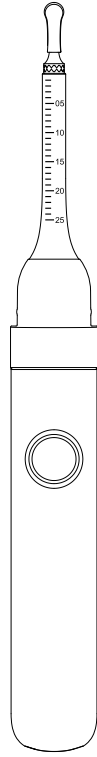

User Manual
EN / DE / FR / ES / IT / JP

Catalog

English	01-03
Deutsch	04-06
Français	07-09
Español	10-12
Italiano	13-15
日本語	16-18

尺寸: 68*145mm


英文

Download App

Step 1: Download the "Soulear" app
For iOS: Download and install the App "Soulear" from App Store.
For Android: Download and install the App "Soulear" from Google Play Store.
Optional: Scan the QR Code below to download the App.




Step 2: Connection Steps
 1. Press and hold the power button to turn on the device, and proceed to the next step after 5 seconds.
 2. Open the "Soulear" App, click the "Connect Device", follow the pop-up prompt and click to connect now to jump to the mobile WiFi interface.

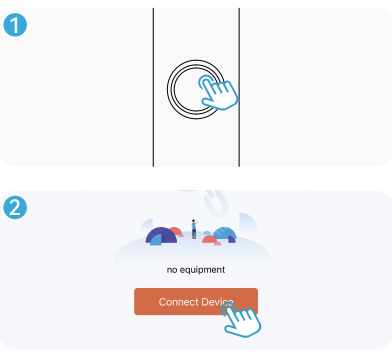


EN-01

3. Find "Soulear-XXXX" on the Wi-Fi settings interface and click to connect.
 4. After the phone displays "Soulear-XXXX" Wi-Fi is connected, return to the App again and click "Connected" to enter the device.

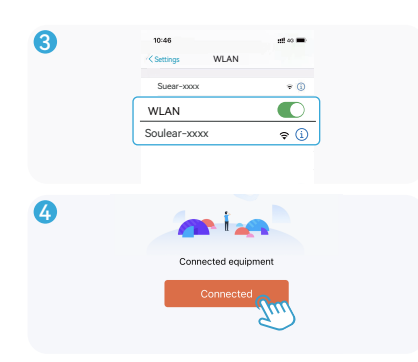


Accessories Installation


Earplug installation:
 Put the earplug on the corresponding scale position of the module tube to avoid inserting it too deep into the ear canal.

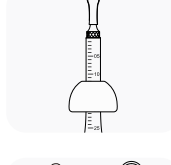

Ear spoon installation:
 Simply screw the metal ear spoon tightly and users can replace different ear spoon silicone covers according to different needs.

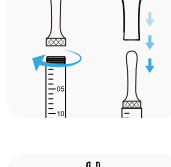

Tweezers installation:
 Install the metal or plastic tweezers kit into the body and secure it in place for normal use.

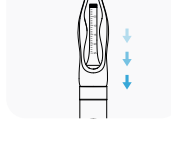

EN-02

Troubleshooting

- Unable to store photos or videos to your phone**
Allow "Soulear" to allow permissions for photos, media, and files in your device.
- The camera does not respond and the camera does not light up**
Please charge your device.
- The app crashed**
Clear the background running on your phone and restart the app. Please charge your device.
- The camera red light flashes**
Please restart the device, open the APP, and connect to WIFI.
- WiFi connection is disconnected**
Please restart the device, open the APP, and connect to WIFI.
- When the phone prompts "Cannot join this WiFi, the network is temporarily unavailable, please try again later"**
When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30 seconds, and reconnect to WiFi to use it.
- When connecting to WiFi, the Android phone prompts "Network access is full"**
When the above situation occurs, please try to turn off the product, turn it on again after 30 seconds, and reconnect to WiFi to use it.
- The ear spoon power indicator lights up red**
Please use the matching charging cable to charge.

*If the above instructions do not resolve the issue, please contact the seller's customer service via email and we will provide you with further solutions.

Product Parameters

Product Name	Smart visual ear pick
Input Current	5V=0.4A
Battery life	About 70 Min
Working environment	-10°C-45°C
Network standard	IEEE 802.11 b/g/n

EN-03


德语

App herunterladen

Schritt 1: Lade die App „Soulear“ herunter
Für iOS: Laden Sie die App „Soulear“ aus dem App Store herunter und installieren Sie sie.
Für Android: Laden Sie die App „Soulear“ aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie sie.
Optional: Scannen Sie den untenstehenden QR-Code, um die App herunterzuladen.



Schritt 2: Verbindungsschritte
 1. Halten Sie die Einschaltstaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten, und fahren Sie nach 5 Sekunden mit dem nächsten Schritt fort.
 2. Öffnen Sie die App „Soulear“, klicken Sie auf „Verbinden Sie das Gerät“, folgen Sie der Pop-up-Anforderung und klicken Sie auf „Jetzt verbinden“, um zur Einstellungsfläche für mobiles WLAN zu springen.

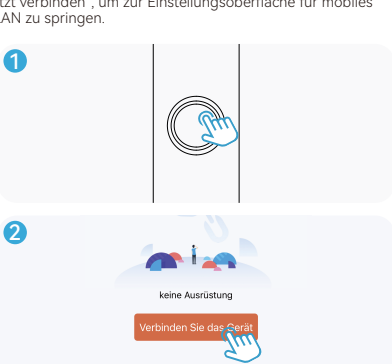

DE-04

3. Suchen Sie in der WLAN-Einstellungsfläche nach „Soulear-XXXX“ und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
 4. Nachdem auf dem Telefon „Soulear-XXXX“ angezeigt wird, dass eine WLAN-Verbindung besteht, kehren Sie erneut zur App zurück und klicken Sie auf „Verbinden“, um das Gerät aufzurufen.




Installation des Zubehörs


Ohrtüpfel-Installation:
 Platzieren Sie den Ohrtüpfel auf der entsprechenden Skalenscala des Modultubes, um ein tiefes Einführen in den Gehörgang zu vermeiden.



Ohrtöffel-Installation:
 Schrauben Sie einfach den metallenen Ohrtöffel fest und Benutzer können die Ohrtöffel-Silikonabdeckungen je nach Bedarf austauschen.

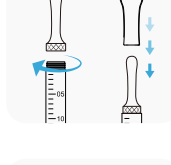

Tweezers installation:
 Install the metal or plastic tweezers kit into the body and secure it in place for normal use.

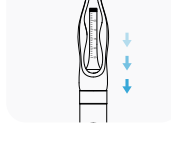

DE-05

Fehlerbehebung

- Fotos oder Videos können nicht auf Ihrem Telefon gespeichert werden**
Erlauben Sie „Soulear“, Berechtigungen für Fotos, Medien und Dateien auf Ihrem Gerät zu erteilen.
- Die Kamera reagiert nicht und die Kamera leuchtet nicht**
Bitte laden Sie Ihr Gerät auf.
- Die App list abgestürzt**
Löschen Sie den Hintergrund Ihres Telefons und starten Sie die App neu.
- Das rote Licht der Kamera blinkt**
Bitte laden Sie Ihr Gerät auf.
- Die WLAN-Verbindung wird getrennt**
Bitte starten Sie das Gerät neu, öffnen Sie die App und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN her.
- Wenn das Telefon die Meldung „Kann diesem WLAN nicht beitreten, das Netzwerk vorübergehend nicht verfügbar, bitte versuchen Sie es später erneut“ anzeigt**
Wenn die oben beschriebene Situation eintritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten, es nach 30 Sekunden wieder einzuschalten und zur Verwendung erneut eine Verbindung zum WLAN herzustellen.
- Beim Verbinden mit WLAN meldet das Android-Telefon „Netzwerkzugriff ist voll“**
Wenn die oben beschriebene Situation eintritt, versuchen Sie bitte, das Produkt auszuschalten, es nach 30 Sekunden wieder einzuschalten und zur Verwendung erneut eine Verbindung zum WLAN herzustellen.
- Die Betriebsanzeige des Ohröffels leuchtet rot**
Zum Laden verwendetes Sie bitte das passende Ladekabel.

*Wenn das Problem durch die oben genannten Anweisungen nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Kundendienst des Verkäufers. Wir werden Ihnen weitere Lösungen anbieten.

Produktparameter

Produktname	Intelligenter optischer Ohrtüpfel
Eingangsstrom	5V=0.4A
Akkulaufzeit	Ca. 70 Min
Arbeitsumgebung	-10°C-45°C
Netzwerkstandard	IEEE 802.11 b/g/n

DE-06

法语

Télécharger l'application

Étape 1 : Téléchargez l'application « Soulear »
Pour iOS : téléchargez et installez l'application « Soulear » depuis l'App Store.
Pour Android : téléchargez et installez l'application « Soulear » depuis Google Play Store.
Facultatif : scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application.



Étape 2 : Étapes de connexion
 1. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil et passez à l'étape suivante après 5 secondes.
 2. Ouvrez l'application « Soulear », cliquez sur « Connectez l'appareil », suivez l'invite contextuelle et cliquez pour vous connecter maintenant pour accéder à l'interface de configuration du WiFi mobile.




FR-07

3. Recherchez « Soulear-XXXX » dans l'interface des paramètres Wi-Fi et cliquez pour vous connecter.
 4. Une fois que le téléphone affiche « Soulear-XXXX », le Wi-Fi est connecté, revenez à l'application et cliquez sur « connecté » pour accéder à l'appareil.




Installation des accessoires


Installation des bouchons d'oreilles :
 Placez le bouchon d'oreille sur la position d'échelle correspondante du tube du module pour éviter de l'insérer trop profondément dans le conduit auditif.

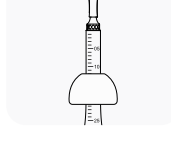

Installation de la cuillère auriculaire :
 Il suffit de visser fermement la cuillère auriculaire en métal et les utilisateurs peuvent remplacer différents couvercles en silicone de cuillère auriculaire en fonction de différents besoins.

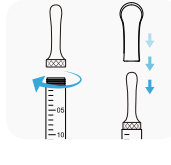

Installation de la pince à épiler :
 Installez le kit de pinces en métal ou en plastique dans le corps et fixez-le en place pour une utilisation normale.

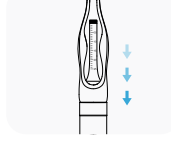

FR-08

Dépannage

- Impossible de stocker des photos ou des vidéos sur votre téléphone**
Autorisez « Soulear » à autoriser les autorisations pour les photos, les médias et les fichiers sur votre appareil.
- L'appareil photo ne répond pas et ne s'allume pas**
Veuillez charger votre appareil.
- L'application a planté**
Effacez l'arrière-plan exécuté sur votre téléphone et redémarrez l'application.
- Le voyant rouge de la caméra clignote**
Veuillez charger votre appareil.
- La connexion WiFi est déconnectée**
Veuillez redémarrer l'appareil, ouvrir l'application et vous connecter au WiFi.
- Lorsque le téléphone affiche le message « Impossible de se connecter à ce réseau Wi-Fi, le réseau est temporairement indisponible, veuillez réessayer plus tard »**
Lorsque la situation ci-dessus se produit, essayez d'éteindre le produit, de le rallumer après 30 secondes et de vous reconnecter au WiFi pour l'utiliser.
- Lors de la connexion au WiFi, le téléphone Android indique « L'accès au réseau est plein »**
Lorsque la situation ci-dessus se produit, essayez d'éteindre le produit, de le rallumer après 30 secondes et de vous reconnecter au WiFi pour l'utiliser.
- Le voyant d'alimentation de l'écouteur s'allume en rouge**
Veuillez utiliser le câble de charge correspondant pour charger.

*Si les instructions ci-dessus ne résolvent pas le problème, veuillez contacter le service client du vendeur par e-mail et nous vous fournirons d'autres solutions.

Paramètres du produit

Nom du produit	Cure-oreille visuel intelligent
Courant d'entrée	5V=0.4A
Autonomie de la batterie	Environ 70 min
Environnement de travail	-10°C-45°C
Norme réseau	IEEE 802.11 b/g/n

FR-09

西班牙

Descargar aplicación

Paso 1: Descarga la aplicación "Soulear"
Para iOS: Descarga e instala la aplicación "Soulear" desde la App Store.
Para Android: Descarga e instala la aplicación "Soulear" desde Google Play Store.
Opcional: Escanea el código QR que aparece a continuación para descargar la aplicación.



Paso 2: Pasos de conexión
 1. Mantenga presionado el botón de encendido para encender el dispositivo y continúe con el siguiente paso después de 5 segundos.
 2. Abra la aplicación "Soulear", haga clic en "Conecta el dispositivo", siga las instrucciones que aparecen y haga clic en conectar ahora para saltar a la interfaz de configuración de WiFi móvil.



ES-10

3. Busque "Soulear-XXXX" en la interfaz de configuración de Wi-Fi y haga clic para conectarse.
 4. Después de que el teléfono muestre "Soulear-XXXX" el Wi-Fi está conectado, regrese a la aplicación nuevamente y haga clic en "conectado" para ingresar al dispositivo.




Instalación de accesorios


Instalación de tapones para los oídos:
 Coloque el tapón para los oídos en la posición de escala correspondiente del tubo del módulo para evitar insertarlo demasiado profundamente en el canal auditivo.



Instalación de la cuchara para los oídos:
 Simplemente enrosca firmemente la cuchara de metal para los oídos y los usuarios pueden reemplazar diferentes cubiertas de silicona para cucharas para los oídos según las diferentes necesidades.

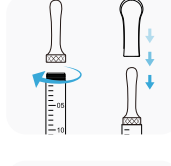

Instalación de pinzas:
 Instale el kit de pinzas de metal o plástico en el cuerpo y fíjelo en su lugar para un uso normal.

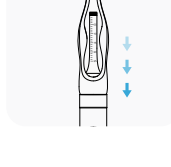

ES-11

Solución de problemas

- No se pueden almacenar fotos ni videos en el teléfono**
Permita que "Soulear" otorgue permisos para fotos, medios y archivos en su dispositivo.
- La cámara no responde y la cámara no se enciende.**
Por favor cargue su dispositivo.
- La aplicación falló**
Borre el fondo ejecutándose en su teléfono y reinicie la aplicación.
- La luz roja de la cámara parpadea.**
Por favor cargue su dispositivo.
- La conexión WiFi está desconectada**
Reinicie el dispositivo, abra la aplicación y conéctese a WiFi.
- Cuando el teléfono indique "No se puede conectar a esta red WiFi, la red no está disponible temporalmente, inténtelo nuevamente más tarde"**
Cuando ocurre la situación anterior, intente apagar el producto, vuelva a encenderlo después de 30 segundos y vuelva a conectarse a WiFi para usarlo.
- Al conectarse a WiFi, el teléfono Android muestra el mensaje "El acceso a la red está completo"**
Cuando ocurre la situación anterior, intente apagar el producto, vuelva a encenderlo después de 30 segundos y vuelva a conectarse a WiFi para usarlo.
- El indicador de encendido de la cuchara para el oído se ilumina en rojo.**
Utilice el cable de carga correspondiente para cargar.

*Si las instrucciones anteriores no resuelven el problema, comuníquese con el servicio de atención al cliente del vendedor por correo electrónico y le brindaremos más soluciones.

Parámetros del producto

Nombre del producto	Auricular inteligente con visión nocturna
Corriente de entrada	5V=0.4A
Duración de la batería	Aprox. 70 min
Entorno de trabajo	-10°C-45°C
Estándar de red	IEEE 802.11 b/g/n

ES-12


意大利

Scarica l'app

Passaggio 1: Scarica l'app "Soulear"
Per iOS: Scarica e installa l'app "Soulear" dall'App Store.
Per Android: Scarica e installa l'app "Soulear" dal Google Play Store.
Facoltativo: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'app.




Fase 2: Passaggi di connessione
 1. Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo e procedere al passaggio successivo dopo 5 secondi.
 2. Aprire l'app "Soulear", fare clic su "Connetti il dispositivo", seguire le istruzioni a comparsa e fare clic per connettersi ora per passare all'interfaccia di impostazione WiFi mobile.

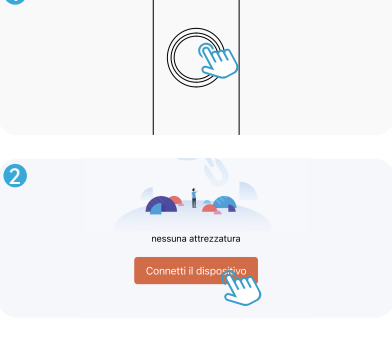

IT-13

3. Trova "Soulear-XXXX" nell'interfaccia delle impostazioni Wi-Fi e clicca per connetterti.
 4. Dopo che il telefono visualizza "Soulear-XXXX", la connessione Wi-Fi è attivata, torna all'app e clicca su "Collegato" per accedere al dispositivo.

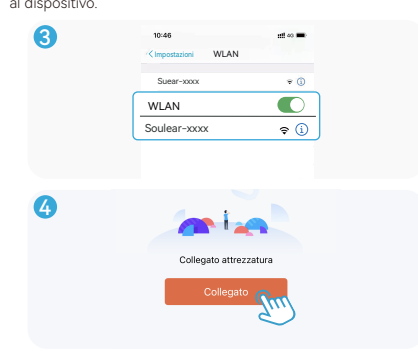


Installazione degli accessori


Installazione dei tappi auricolari:
 Posizionare il tappo auricolare nella posizione corrispondente della scala del tubo del modulo per evitare di inserirlo troppo in profondità nel condotto uditivo.



Installazione del cucchiolo auricolare:
 Basta avvitare saldamente il cucchiolo auricolare in metallo e gli utenti possono sostituire diverse coperture in silicone dei cucchioli auricolari in base alle diverse esigenze.

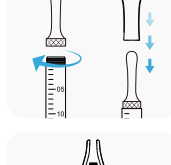

Installazione delle pinzette:
 Installa il kit di pinzette in metallo o plastica nel corpo e fissalo in posizione per un normale utilizzo.

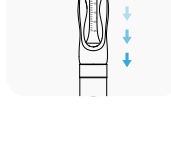

IT-14

Risoluzione dei problemi

- Impossibile memorizzare foto o video sul telefono**
Consenti a "Soulear" di concedere le autorizzazioni per foto, contenuti multimediali e file sul tuo dispositivo.
- La fotocamera non risponde e non si accende**
Si prega di caricare il dispositivo.
- L'app si è bloccata**
Cancella lo sfondo in esecuzione sul tuo telefono e riavvia l'app.
- La luce rossa della fotocamera lampeggia**
Si prega di caricare il dispositivo.
- La connessione WiFi è interrotta**
Riavvia il dispositivo, apri l'APP e connetti al WiFi.
- Quando il telefono visualizza il messaggio "Impossibile connettersi a questo WiFi, la rete è temporaneamente non disponibile, riprova più tardi"**
Quando si verifica la situazione sopra descritta, provare a spegnere il prodotto, riaccenderlo dopo 30 secondi e riconnettersi al Wi-Fi per utilizzarlo.
- Quando ci si connette al WiFi, il telefono Android visualizza il messaggio "Accesso alla rete è completo"**
Quando si verifica la situazione sopra descritta, provare a spegnere il prodotto, riaccenderlo dopo 30 secondi e riconnettersi al Wi-Fi per utilizzarlo.
- L'indicatore di alimentazione del cucchiolo auricolare si illumina in rosso**
Si prega di utilizzare il cavo di ricarica corrispondente per caricare.

*Se le istruzioni sopra riportate non risolvono il problema, contatta il servizio clienti del venditore via e-mail e ti fornirò ulteriori soluzioni.

Parametri del prodotto


Nome prodotto	Auricolare visivo intelligente
Corrente di ingresso	5V=0.4A
Durata della batteria	Circa 70 min
Ambiente di lavoro	-10°C-45°C
Standard di rete	IEEE 802.11 b/g/n

IT-15

日本

アプリをダウンロード

ステップ1: 「Soulear」アプリをダウンロードする
iOSの場合: App Storeから「Soulear」アプリをダウンロードしてインストールします。
Androidの場合: Google Playストアから「Soulear」アプリをダウンロードしてインストールします。
オプション: 下のQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードします。

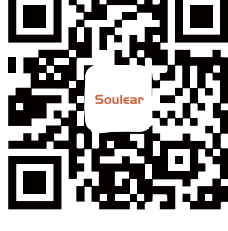

ステップ2: 接続手順
 1. 電源ボタンを長押ししてデバイスの電源を入れ、5秒後に次の手順に進みます。
 2. 「Soulear」アプリを開き、「機器に接続する」をクリックし、ポップアッププロンプトに従って「今すぐ接続」をクリックして、モバイルWiFi設定インターフェイスにジャンプします。




JP-16

3. Wi-Fi設定メニューで「Soulear-XXXX」を見つけてクリックして接続します。
 4. 携帯電話に「Soulear-XXXX」と表示され、Wi-Fiが接続されたら、もう一度アプリに戻り、「接続済み」をクリックしてデバイスに戻ります。




アクセサリの取り付け


耳栓の取り付け:
 耳栓をモジュールチューブの対応するスケールの位置に置き、押し込みすぎないようにします。

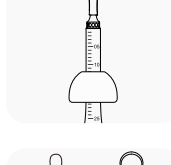

イヤースプーンの取り付け:
 金属製のイヤースプーンをしっかりと押し込み、ユーザーはさまざまなイヤースプーンのシリコンカバーを交換できます。

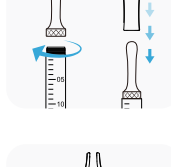

ピンセットの取り付け:
 金属またはプラスチック製のピンセットキットを本体に所定の位置に固定します。

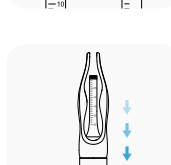

JP-17

トラブルシューティング

- 写真やビデオを携帯電話に保存できない**
「Soulear」に写真やビデオのアクセスを許可してください。
- カメラが反応せず、カメラが点灯しない**
デバイスを充電してください。
- アプリがクラッシュした**
携帯電話で実行されているバックグラウンドをクリアし、アプリを再起動します。
- カメラの赤いライトが点滅する**
デバイスを充電してください。
- WiFi接続が切断される**
デバイスを再起動し、アプリを開いて、WiFiに接続してください。
- 携帯電話に「このWi-Fiに接続できません。ネットワークは一時的に利用できません。しばらくしてからもう一度お試しください」というメッセージが表示されたら**
上記の状況が発生した場合は、製品の電源をオフにし、30秒後に再度電源をオンにして、WiFiに再接続して使用してください。
- WiFiに接続すると、Androidスマートフォンに「ネットワークアクセスが満杯です」というメッセージが表示されます**
上記の状況が発生した場合は、製品の電源をオフにし、30秒後に再度電源をオンにして、WiFiに再接続して使用してください。
- イヤースプーンの電源インジケータが赤く点灯します**
充電には適合する充電ケーブルを使用してください。

*上記の手順で問題が解決しない場合は、メールで販売者のカスタマーサービスに連絡してください。さらなる解決策を提供いたします。

製品パラメータ

製品名	スマートビジュアル耳栓
入力電圧	5V=0.4A
電池寿命	約70分
動作環境	-10°C-45°C
ネットワーク規格	IEEE 802.11 b/g/n

JP-18